

FICHE TECHNIQUE – Canapé 2P ROK-CL02



Le canapé ROK-CL02 est un mobilier rotomoulé conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriqué en France, sa structure monobloc robuste, résistante aux chocs et aux fluides, garantit sécurité, stabilité et durabilité pour un usage intensif au quotidien tout en limitant les risques de basculement.

Grâce à son design sécurisant et à sa stabilité renforcée, le canapé ROK-CL02 répond aux contraintes des environnements à risques et des espaces collectifs sécurisés. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, il offre également une excellente résistance aux chocs, une possibilité de lestage et une garantie à vie pour une durabilité optimale et une réduction du coût global de possession.

■ **Hauteur assise** 16,9 / 17,2 po

■ **Hauteur totale** 31,7 po

■ **Largeur** 50,9 po

■ **Profondeur** 25,5 po

■ **Poids (sans lestage)** 36 kg

■ **Charge statique testée** 600 kg


■ **Options**

Lestage jusqu'à 100 kg
– Galettes de confort (fixe) – Pattes de fixation au sol



*Garantie à vie

De
plus près

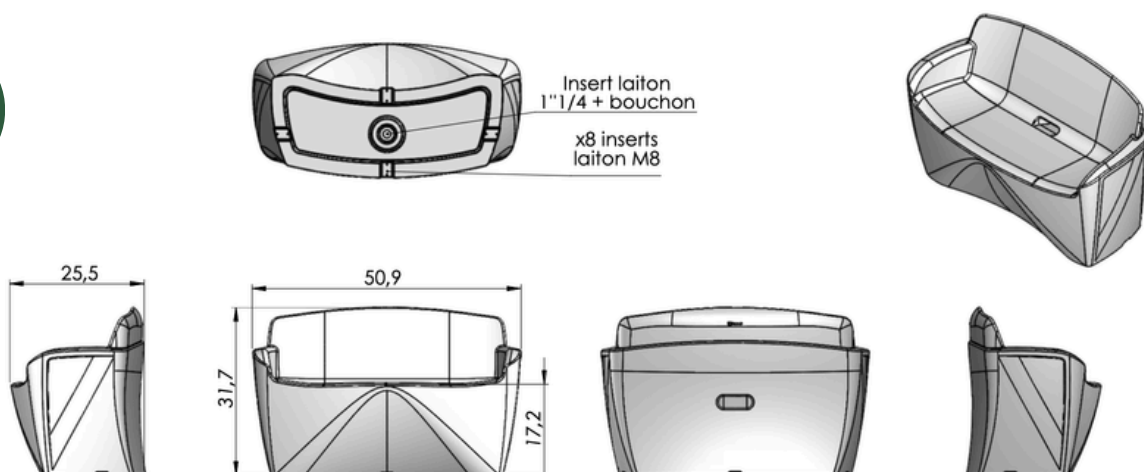




Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
 - Eau de javel diluée 0,1-0,5 %
 - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
 - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
 - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien



Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

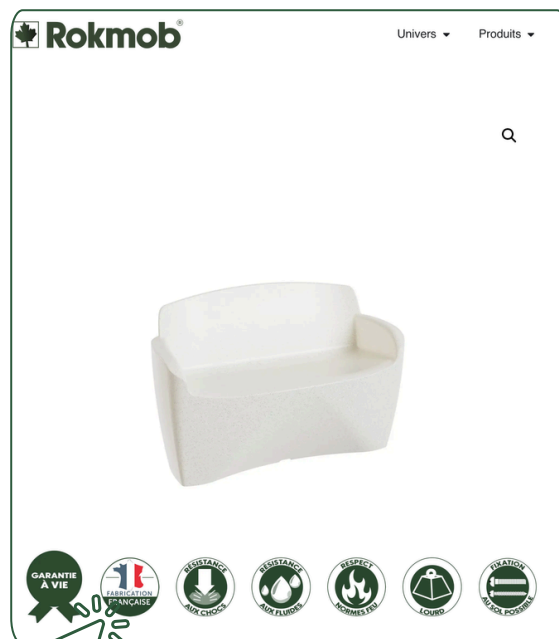

Cliquez ici
pour en savoir plus