

FICHE TECHNIQUE – Chaise avec accoudoir ROK-CHA02



La chaise avec accoudoirs ROK-CHA02 est un mobilier rotomoulé monobloc conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriquée en France, sa structure robuste résiste aux chocs et aux fluides tout en offrant un confort supplémentaire grâce à ses accoudoirs intégrés. Testée à 600 kg de charge statique.

Grâce à sa stabilité renforcée et à sa conception monobloc sécurisée, la chaise ROK-CHA02 répond aux contraintes des environnements à risques tout en améliorant le confort des utilisateurs. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, elle constitue une solution durable et économique avec possibilité de lestage et garantie à vie.

■ **Hauteur assise** 17,3 / 17,7 po

■ **Hauteur totale** 32,2 po

■ **Largeur** 23,4 po

■ **Profondeur** 21,1 po

■ **Poids (sans lestage)** 12 kg

■ **Charge statique testée** 600 kg


■ **Options**

Lestage jusqu'à 60 kg –
Galettes de confort –
Pattes de fixation au sol



*Garantie à vie

De
plus près

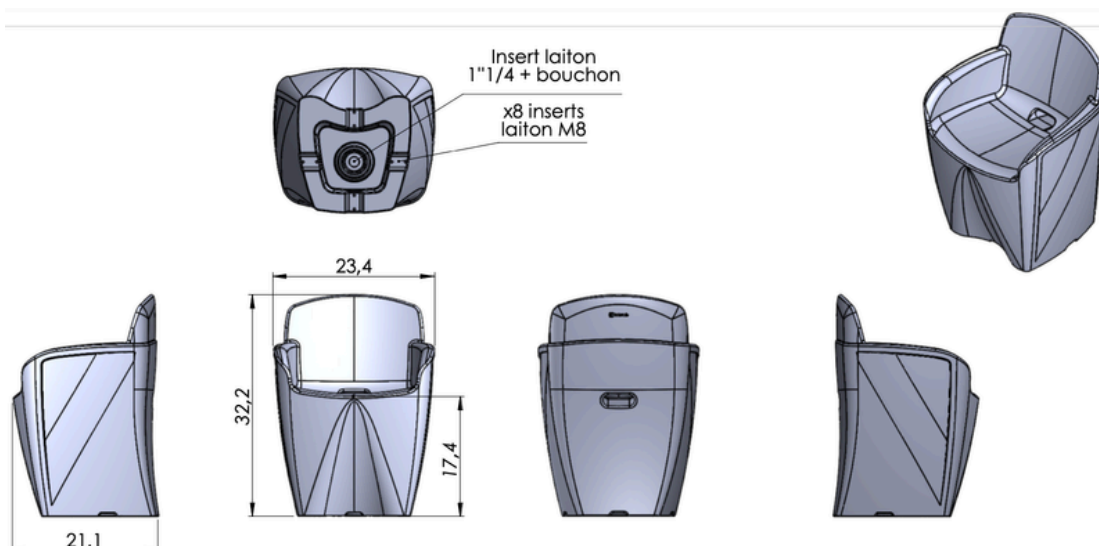



Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
 - Eau de javel diluée 0,1-0,5 %
 - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
 - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
 - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien



Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

**Rokmob®**

Univers ▾

Produits ▾



Cliquez ici
pour en savoir plus