

FICHE TECHNIQUE – Chaise sans accoudoir ROK-CHA01



La chaise ROK-CHA01 est un mobilier rotomoulé monobloc conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriquée en France, sa conception robuste et sa prise en main limitée réduisent les usages détournés tout en garantissant stabilité, sécurité et résistance aux usages intensifs. Testée à 600 kg de charge statique.

Grâce à son design anti-basculement et à sa structure monobloc sécurisée, la chaise ROK-CHA01 répond aux contraintes des environnements à risques. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, elle constitue une solution durable et économique avec possibilité de lestage et garantie à vie.

■ **Hauteur assise** 17,3 / 17,7 po

■ **Hauteur totale** 31,6 po

■ **Largeur** 18,6 po

■ **Profondeur** 20,1 po

■ **Poids (sans lestage)** 12 kg

■ **Charge statique testée** 600 kg


■ **Options**

Lestage jusqu'à 60 kg –
Galettes de confort –
Pattes de fixation au sol



*Garantie à vie

De
plus près

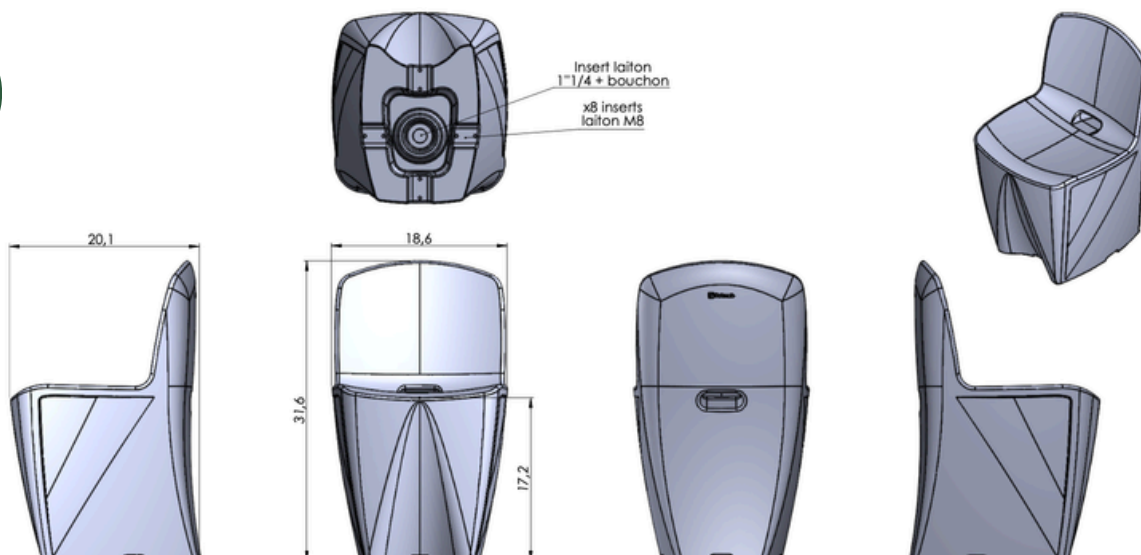



Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
 - Eau de javel diluée 0,1-0,5 %
 - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
 - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
 - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien



Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours



Univers ▾

Produits ▾



Cliquez ici
pour en savoir plus